

新商品、続々登場!

ELISAキット

キャンペーン番号  
1708

50%OFF  
キャンペーン

キャンペーン  
期間 2017年10月2日～  
2017年11月30日

対象 ELISA キット全商品

APOL1 (品番: KE00047)、TDP-43 (品番: KE00005) を除く


NEW

# プロテインテック ELISA キットシリーズ



① 新商品、続々登場!  
絶賛ラインアップ拡大中

② 高品質!  
完全自社製造の抗体メーカーだからできる、  
「最適な抗体ペア」の選択

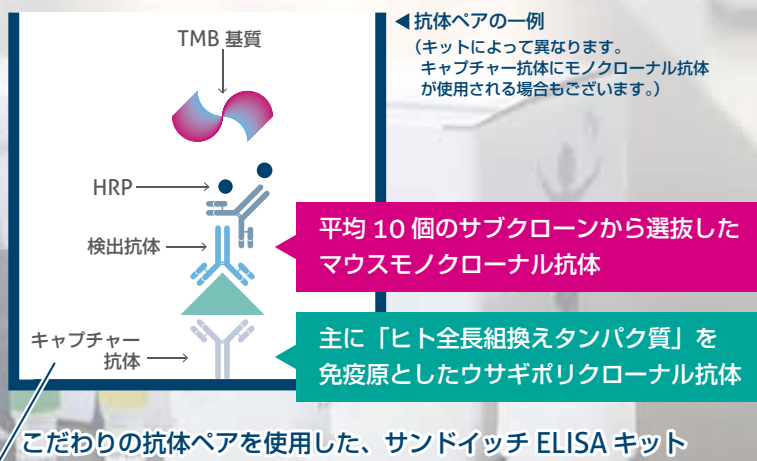

お求めやすい価格帯でラインアップ

商品	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
イチ押し の 20 品目	WEB 検索	1 kit (96 assay)	¥93,000	¥46,500
その他、約 100 品目	WEB 検索	1 kit (96 assay)	¥74,000	¥37,000

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI

\*国内在庫の有無//納期につきましては、弊社または弊社商品取り扱い販売店まで、お問い合わせください。

セールス / テクニカルサポート

国内販売

# 50%OFFキャンペーン 実施中!

キャンペーン 2017年10月2日(日) ~  
 期間 2017年11月30日(木)

キャンペーン番号  
**1708**

**ELISA キット全商品** APOL1 (品番: KE00047)、  
 TDP-43 (品番: KE00005) を除く

## プロテインテック ELISA キットの特長

### 自社製造抗体を利用したサンドイッチ ELISA

- 自社製造抗体をスクリーニングし、最適な抗体ペアを選択
- 完全長タンパク質抗原によって作製された抗体は、三次元構造を認識し、内在性ターゲットタンパク質を確実に高い信頼性で検出
- 血清、血漿、細胞培養上清等、様々なサンプルを測定可能

### 徹底した品質管理

- 各 ELISA キットは、アッセイ内およびアッセイ間の精度を厳密に評価・検証  
アッセイの一貫性を示すデータ (intra / inter アッセイ) とサンプル回収率を示すデータ (添加回収試験) をデータシートに記載
- キットに含まれるスタンダードタンパク質は NIBSC/WHO\* standard を用いてキャリブレーション済み  
\* NIBSC (National Institute for Biological Standards and Control) は、WHO 標準品を世界に提供する英国の機関です。

### 簡便

- 各キットには、ELISA 実験に必要な、スタンダードタンパク質を含む全ての試薬と溶液が付属
- 96 ウェルマイクロプレートは、キャプチャー抗体をコート済み
- 簡単な 3 ステップの検出システム。結果測定は 450 nm の一般的なプレートリーダーを利用可能

## 構成内容

構成品	数量	保存	構成品	数量	保存
キャプチャー抗体コート済み 96 well マイクロプレート (8 wells x 12 ストリップ)	1 plate	4°C (または -20°C*1)	検出抗体希釈液 - 30 mL/bottle	1 bottle	4°C
凍結乾燥スタンダード	2 bottles		抽出試薬*3 - 30 mL/bottle	1 bottle	
検出抗体 (100X) - 150 µL/vial	1 vial		濃縮洗浄バッファー (20X) - 30 mL/bottle	1 bottle	
HRP- 標識抗体 (100X) - 150 µL/vial (ストレプトアビジン - HRP (100X) - 150 µL/vial *2)	1 vial	4°C	TMB 基質 - 12 mL/bottle	1 bottle	
サンプル希釈液 - 30 mL/bottle	1 bottle		反応停止液 - 12 mL/bottle	1 bottle	
			プレートカバーシール	3 pieces	

\*1: 弊社からは冷凍品 (-20°C) としてお届けします。

\*2: キットによって含まれる HRP 標識試薬が異なります。

\*3: サンプルに細胞 / 組織ライセートを用いる場合のみ使用します。  
付属しないキットもございます。

## 手順: 午後から始めて、夕方までには実験完了

手順	試薬	容量	インキュベーション	洗浄	注意事項
1-5	スタンダード / サンプル	100 µL	60 分間	4 回	ウェルをカバーする
6	希釈した検出抗体	100 µL	60 分間	4 回	ウェルをカバーする
7	HRP 標識試薬	100 µL	40 分間	4 回	ウェルをカバーする
8	TMB 基質	100 µL	15-20 分間	不要	37°C、暗所で静置
9	反応停止液	100 µL	-	不要	-
10	マイクロプレートリーダーで吸光度を測定 (測定: 450 nm、補正用対照波長: 630 nm)				



# 50%OFFキャンペーン 実施中!

キャンペーン期間 2017年10月2日(日) ~ 2017年11月30日(金)

キャンペーン番号 1708



**ELISA キット全商品** APOL1 (品番: KE00047)、TDP-43 (品番: KE00005) を除く

## ヒトタンパク質 ELISA キット (つづき)

包装: 1 kit (96 assay)

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PG

カテゴリ	ターゲット	測定対象	測定サンプル	測定範囲	感度	品番	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
膜タンパク質	HSPD1	ヒト	血清, 血漿	31.25-2000 pg/mL	7 pg/mL	KE00032	¥74,000	¥37,000
	MHC class I	ヒト	血清, 血漿	31.25-2000 pg/mL	19.6 pg/mL	KE00035	¥74,000	¥37,000
	NINJ2	ヒト	血清, 血漿	0.313-20 ng/mL	0.2 ng/mL	KE00038	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	PG II	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	1.56-100 ng/mL	0.03 ng/mL	KE00090	¥74,000	¥37,000
	PGA5	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.5-32 ng/mL	0.16 ng/mL	KE00084	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	SELP	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.25-16 ng/mL	0.025 ng/mL	KE00064	¥74,000	¥37,000
	TNFR1	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	31.25-2000 pg/mL	2.9 pg/mL	KE00051	¥74,000	¥37,000
神経科学	Fetuin-A	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.313 - 20 ng/mL	0.1 ng/mL	KE00097	¥74,000	¥37,000
神経栄養因子	BDNF	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	12.5 - 800 pg/mL	0.14 pg/mL	KE00096	¥74,000	¥37,000
肥満研究	INS	ヒト	血清, 血漿	7.8-500 pmol/L	1.32 pmol/L	KE00045	¥74,000	¥37,000
	Leptin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6 - 500 pg/mL	2 pg/mL	KE00095	¥74,000	¥37,000
細胞生物学	S100B	ヒト	クエン酸血漿, 細胞培養上清	15.6 - 1000 pg/mL	1 pg/mL	KE00103	¥74,000	¥37,000
	Albumin	ヒト	血清, 血漿, 尿	12.5-800 ng/mL	8 ng/mL	KE00076	¥74,000	¥37,000
	APOD	ヒト	血清, 血漿	0.313-20 ng/mL	0.01 ng/mL	KE00067	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	CYB5R3	ヒト	血清, 血漿, 細胞ライセート	31.25-2000 pg/mL	3.5 pg/mL	KE00069	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	ENO2	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清	0.313-20 ng/mL	0.11 ng/mL	KE00050	¥74,000	¥37,000
	FKBPL	ヒト	血清, 血漿	31.25-2000 pg/mL	7 pg/mL	KE00023	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	HDAC1	ヒト	血清, 血漿	62.5-4000 pg/mL	11 pg/mL	KE00033	¥74,000	¥37,000
	HSP70	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	31.25-2000 pg/mL	1 pg/mL	KE00059	¥74,000	¥37,000
	HSP90	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	125-8000 pg/mL	90 pg/mL	KE00054	¥74,000	¥37,000
	IDH1	ヒト	血清, 血漿, 細胞ライセート	62.5-4000 pg/mL	3.3 pg/mL	KE00060	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	JNK	ヒト	細胞ライセート	1.56-100 ng/mL	0.1 ng/mL	KE00072	¥74,000	¥37,000
	MammaglobinA	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	125-8000 pg/mL	5 pg/mL	KE00071	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	P21	ヒト	細胞ライセート	0.25-16 ng/mL	0.1 ng/mL	KE00049	¥74,000	¥37,000
	PLA2G1B	ヒト	細胞培養上清, 細胞ライセート	0.094 - 96 ng/mL	0.08 ng/mL	KE00098	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	SMN2	ヒト	組織ライセート, 細胞ライセート	62.5-4000 pg/mL	6 pg/mL	KE00027	¥93,000	イチ押し ¥46,500
	TDP-43	ヒト	血清, 血漿	62.5-2000 pg/mL	40 pg/mL	KE00005	¥93,000	イチ押し 対象外
	Uteroglobin	ヒト	血清, 血漿, 細胞培養上清, 尿	0.156 - 10 ng/mL	0.03 ng/mL	KE00099	¥74,000	¥37,000

## マウス・ラットタンパク質 ELISA キット

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PG

カテゴリ	ターゲット	測定対象	測定サンプル	測定範囲	感度	品番	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
サイトカイン	Baff	マウス	血清, 細胞培養上清	62.5-4000 pg/mL	23.01 pg/mL	KE10026	¥74,000	¥37,000
	CCL3	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	1.95 - 125 pg/mL	0.03 pg/mL	KE10023	¥74,000	¥37,000
	CCL5	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	5.7 pg/mL	KE10017	¥74,000	¥37,000
	CXCL1	マウス	細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	6.2 pg/mL	KE10019	¥74,000	¥37,000
	G-CSF	マウス	血清, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	0.82 pg/mL	KE10025	¥74,000	¥37,000
	GM-CSF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	4.7 - 300 pg/mL	1.2 pg/mL	KE10015	¥74,000	¥37,000
	IFN-γ	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	5.5 pg/mL	KE10001	¥74,000	¥37,000
	IL1-α	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	2.7 pg/mL	KE10024	¥74,000	¥37,000
	IL1-β	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清, 細胞ライセート	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10003	¥74,000	¥37,000
	IL2	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	0.5 pg/mL	KE10004	¥74,000	¥37,000
	IL4	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10010	¥74,000	¥37,000
	IL5	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10018	¥74,000	¥37,000
	IL6	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	3.8 pg/mL	KE10007	¥74,000	¥37,000
	IL10	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2.5 pg/mL	KE10008	¥74,000	¥37,000
	IL12 p70	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	2.2 pg/mL	KE10014	¥74,000	¥37,000
	IL13	マウス	細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	1.5 pg/mL	KE10021	¥74,000	¥37,000
	IL17A	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	2.6 pg/mL	KE10020	¥74,000	¥37,000
	IL21	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	0.5 pg/mL	KE10012	¥74,000	¥37,000
	IL27	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25 - 2000 pg/mL	2 pg/mL	KE10016	¥74,000	¥37,000
	MCP1	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	3.13-200 pg/mL	1.34 pg/mL	KE10006	¥74,000	¥37,000
	CXCL2	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25 - 500 pg/mL	20.45 pg/mL	KE10022	¥74,000	¥37,000
	TGF-β 1	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	31.25-2000 pg/mL	16 pg/mL	KE10005	¥74,000	¥37,000
	TNF-α	マウス	細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	1 pg/mL	KE10002	¥74,000	¥37,000
	VEGF	マウス	血清, 血漿, 細胞培養上清	7.8-500 pg/mL	2 pg/mL	KE10009	¥74,000	¥37,000
	TNF-α	ラット	細胞培養上清	15.6-1000 pg/mL	7.7 pg/mL	KE20001	¥74,000	¥37,000

### 取扱店

お願い/注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は2017年10月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

http://www.cosmobio.co.jp/



人と科学のステキな未来へ

## コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ  
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ  
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル